

### ökoCleaner



REF	OEC2501	OEC2502	OEC2504	OEC2505	OEC2506
REF Sortiment / assortment			OEC2500		
Schaft / shank	RA	RA	RA	RA	RA
	10	10	10	10	10

- für die schonende Beseitigung von harten und weichen Belägen
- für die Füllungspolitur und das Finishing von Präparationen
- ermöglicht die subgingivale Wurzelglättung und die Politur schwer zu erreichender interdentaler Wurzelbereiche
- Eliminierung von Zementüberschüssen ohne Schädigung benachbarter Weichgewebe bei der Darstellung von Provisorien und Implantaten
- Entfernung von Kleberresten
- Wurzelglättung nach dem Scaling

- gentle removal of hard and soft plaque
- for finishing of filling and preparation
- allows the subgingival root smoothing and polish of difficult achieved interproximal root areas
- elimination of cement excesses without damage of neighbouring soft tissues in the presentation of temporary restoration or implants
- removal of remnants
- root smoothing after scaling



### Eigenschaften

- Instrumente durch kontinuierliche Abrasion selbstschärfend
- Keine Abrasion von Schmelz und Keramik
- Schonend zu Dentin, Wurzelzement und Komposit
- Gleitet über Weichgewebe

### Properties

- instruments are self-sharpening by continuous abrasion
- no abrasion of enamel and ceramics
- gentle treatment of dentin, root cement and composite
- instrument slides over soft tissue

### Anwendung

- zur Verwendung im blauen oder grünen Winkelstück mit reduzierter Drehzahl
- Arbeitsdrehzahl: 10.000 - 15.000 min<sup>-1</sup>
- unter leichtem Druck und Wasserspray arbeiten
- Reinigung im med. Alkohol
- im Autoklaven bis 135°C sterilisieren

### Application

- for the use with contra angle handpiece with reduced speed rotation
- working speed rotation: 10.000 - 15.000 rpm
- please work with using slight pressure and water spray
- cleaning in medical alcohol
- sterilising in the autoclave up to 135°C

### Praktische Hinweise

- Spitze Form bevorzugt für die Politur der unteren Approximalräume
- „Paroformen“ eignen sich besonders für das Polieren von Furkationen an Molaren


### Practical advice

- pointed shape preferred for polishing in down approximal areas
- paro figures are suitable especially for polishing of furcations at the molars

### UPOFIX

Für Keramik und extra-harte Verblendkunststoffe (Iosit, Dentacolor, Elcebond, Visiogem).

For ceramic and extra hard veneer resin (iosit, dentacolor, Elcebond, Visiogem).

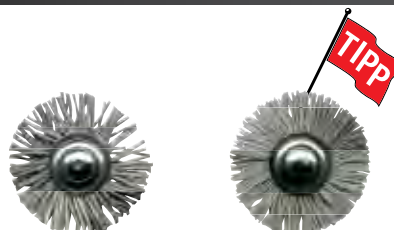

REF	UP249	UP259
Ø / L (in mm)	220	220
Schaft / shank	HP	HP
	10/5/1	10/5/1

### Anwendungshinweis

- UPOFIX erhält alle eingearbeiteten Strukturen.
- Die besten Effekte werden bei Drehzahlen von 2.000 - 5.000 min<sup>-1</sup> erzielt.
- Glätten von Aufbiss-, Knirscherschienen
- schonende Entfernung von Zahnsteinresten an Prothesen nach der Ultraschallreinigung
- Finieren von Kunststoffprovisorien

### Recommendation for use

- UPOFIX receives all incorporated structures.
- The best results are achieved with speed 2.000 - 5.000 min<sup>-1</sup>.
- Smoothing of occlusal and bite splint
- Careful elimination of calculus on prothesis after ultrasonic cleaning
- Finishing of plastic temporary restoration.

### PROPHY-WHITE

Prophylaxepolierer mit eingearbeiteten Abrasivstoffen  
*Prophylaxis polisher with incorporated abrasive substances*

opt. 2.000 min<sup>-1</sup>  
 max. 5.000 min<sup>-1</sup>

Gummipolierer ohne Abrasivstoffe und Spritzschutz  
*Rubber polisher without abrasive substances and splash guard*



REF	PM1222	PM1225
Ø / L (in mm)	6,5 / 9,5	6,5 / 9,5
Schaft / shank	RA	RA
	50 / 10	100

### PROPHY-BLUE

Prophylaxepolierer mit eingearbeiteten Abrasivstoffen  
*Prophylaxis polisher with incorporated abrasive substances*

opt. 2.000 min<sup>-1</sup>  
 max. 5.000 min<sup>-1</sup>



REF	PM1232	PM1233	PM1235
Ø / L (in mm)	5 / 10	3 / 6	6,5 / 9,5
Schaft / shank	RA	RA	RA
	50 / 10	50 / 10	50 / 10

### Anwendungshinweis

**PROPHY-WHITE** und **BLUE** sind besonders effizient, da die Polierpaste bereits in das Material eingearbeitet ist. Sie eignen sich gut zum Recall nach kieferorthopädischen und Ultraschall-Behandlungen

### Recommendation for use

**PROPHY-WHITE** and **BLUE** are especially efficient because the polishing paste is incorporated in the material. They are suitable for recall after orthodontic and ultrasonic treatment.

### PROPHY TWIST

- entfernt Verfärbungen aller Art
- mit und ohne Polierpaste anwendbar
- Einwegprodukt
- latexfrei

- *removes discoloration of all kinds*
- *applicable with and without polishing paste*
- *disposable product*
- *latex-free*

10.000 - 15.000 min<sup>-1</sup>



REF	PM1229
Ø / L (in mm)	14 / 1,6
Schaft / shank	RA
	10

### PROPHY-BRUSH

weiche Borsten zur Schonung der Weichgewebe in Sulkusnähe  
*soft brushes protect the soft tissue in the near of sulcus*

Zur Zahnreinigung (im Autoklav bis 145 °C sterilisierbar)

*For teeth cleaning (sterilized in the autoclave up to 145 °C)*

opt. 2.000 min<sup>-1</sup>  
 max. 2.000 min<sup>-1</sup>



REF	PM1287
Ø / L (in mm)	6 / 5,5
Schaft / shank	RA
	50 / 10

### Anwendungshinweis

**PROPHY-BRUSH** ist hygienisch unbedenklich, da ausschließlich geschlossene Nylonfasern zum Einsatz kommen - keine Kapillarwirkung.

### Recommendation for use

**PROPHY-BRUSH** is hygienically harmless, because for using are only concluded nylon fibres - no capillary action.

### INTERDENTAL-BÜRSTE

### INTERDENTAL-BRUSH



max. 400 min<sup>-1</sup>

REF	PMI1200
Ø / L (in mm)	2-5 / 11
Schaft / shank	RA
	10

### Anwendungsmöglichkeiten

- Prophylaxe (Reinigung der Approximalräume)
- Reinigung von Implantaten
- Reinigung von Brackets (KFO)
- Wurzelkanalreinigung
- geeignet für die Anwendung unter Brücken

### Application possibilities

- *Prophylaxis (cleaning the approximal area)*
- *Cleaning of implants*
- *Cleaning of brackets*
- *Cleaning of the root canal*
- *Suitable for utilization under bridges*

### PROPHY-SNAP

Polierer mit snap-on Mandrell zum Einsatz mit Polierpaste

*Polisher with snap-on mandrel for application with polishing paste*

max. 5.000 min<sup>-1</sup>



REF	PA4037	P1250 (Set mit 100 Polierern + 2 Mandrellen) (Kit with 100 polishers + 2 mandrels)
Ø / L (in mm)		
Schaft / shank	RA	RA
	5	100

### Anwendungshinweis

**PROPHY-SNAP** ist durch das nahezu unbegrenzt haltbare Mandrell und die sehr lange nutzbaren Kelche sehr wirtschaftlich.

### Recommendation for use

**PROPHY-SNAP** is very economical because of very durable mandrel and long usable chalices.

### PROPHY-BRUSH

#### Nylon-Prophylaxe-bürsten

standard – mittlere Härte



REF	PM1273	PM1274	PM1275	PM1276	PM1277	PM1225
Ø / L (in mm)	2 / 3,5	2 / 3,5	4 / 6,5	4 / 6,5	6 / 4,5	6,5 / 9,5
Schaft / shank	RAL	RA	RA	RA	RA	RA
	100	100	100	100	100	100

### Anwendungshinweis

Die nebenstehenden Prophylaxe-Bürsten sind in drei Härten erhältlich und eignen sich zur gezielten Entfernung von Belägen und leichtem Zahnstein. Die **blaue harte Ausführung** ist notwendig bei besonders hartnäckigen Belägen. Der Aufwand und die notwendige Zeit zur Politur werden reduziert. Die **violetten Bürsten mit mittlerer Härte** sind die Standard-Prophylaxe-Instrumente äquivalent zu den weißen Bürsten. Mit den **weichen rosa Instrumenten** ist eine besonders patientenschonende Arbeit möglich. Sie erleichtern die Prophylaxe bei empfindlichen Patienten und sorgen für schonende Reinigung bei vorgeschädigten Zähnen und Zahnfleisch.

**Die Prophylaxe-Bürsten sind für die Einmalanwendung vorgesehen und dürfen somit nicht wiederverwendet werden!**

### PROPHY-BRUSH

#### Nylon-Prophylaxe-bürsten

blau – harte Ausführung



REF	PM1473	PM1474	PM1475	PM1476	PM1477	PM1425
Ø / L (in mm)	2 / 3,5	2 / 3,5	4 / 6,5	4 / 6,5	6 / 4,5	6,5 / 9,5
Schaft / shank	RAL	RA	RA	RA	RA	RA
	100	100	100	100	100	100

### PROPHY-BRUSH

#### Nylon-Prophylaxe-bürsten

violett – mittlere Härte



REF	PM1573	PM1574	PM1575	PM1576	PM1577	PM1525
Ø / L (in mm)	2 / 3,5	2 / 3,5	4 / 6,5	4 / 6,5	6 / 4,5	6,5 / 9,5
Schaft / shank	RAL	RA	RA	RA	RA	RA
	100	100	100	100	100	100

### PROPHY-BRUSH

#### Nylon-Prophylaxe-bürsten

rosa – weiche Ausführung



REF	PM1673	PM1674	PM1675	PM1676	PM1677	PM1625
Ø / L (in mm)	2 / 3,5	2 / 3,5	4 / 6,5	4 / 6,5	6 / 4,5	6,5 / 9,5
Schaft / shank	RAL	RA	RA	RA	RA	RA
	100	100	100	100	100	100