


OCCLUPOL 2 mm

Kauflächenpolierer
Occlusal surface
polisher

10.000 - 15.000 min⁻¹

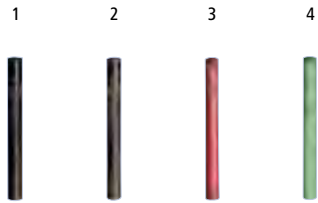

Abverkauf
clearance sale

Abverkauf
clearance sale

REF	P21100	P21101	P21102	P21103
Ø / L (in mm)	2 / 20	2 / 20	2 / 20	2 / 20
	100/50/10	100/50/10	100/50/10	100/50/10

Anwendungshinweis

Kauflächenpolierer in fein abgestuften Körnungen zur Politur von Edelmetallen, Nichtedelmetallen und Chrom-Kobalt-Legierungen.

Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen und das Reinigen des Kroneninneren von Frontzahn-UK-Kronen.


Die 2 mm dünnen Pins sind z.B. besonders gut geeignet für die Politur von Fissuren.

- 1 Schwarz, mittelharte Ausführung für Nichtedelmetalle und Gold
- 2 Braun, extraharte Ausführung für Nichtedelmetalle und Gold
- 3 Rot, fein, Edelmetall - Vorpolitur
- 4 Grün, x-fein, Edelmetall - Hochglanzpolitur
- 5 Blau, grob, (Diamantanteil) für Keramik, NEM, Edelmetall und Titan
- 6 Violett, medium, (Diamantanteil) f. Keramik, NEM, Edelmetall, Titan

OCCLUPOL 3 mm

Kauflächenpolierer
Occlusal surface
polisher

10.000 - 15.000 min⁻¹

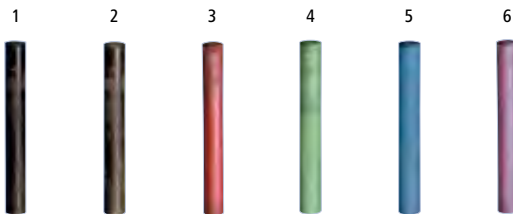

Abverkauf
clearance sale

Abverkauf
clearance sale

REF	P31100	P31101	P31102	P31103	P31116	P31117
Ø / L (in mm)	3 / 23	3 / 23	3 / 23	3 / 23	3 / 23	3 / 23
	100/50/10	100/50/10	100/50/10	100/50/10	10/5	10/5

Recommendation for use

Chewing surface polisher in finely graduated grits for polish of precious metals, non-precious metals and chrome cobalt alloys.

Especially available to work in confined spaces and for cleaning inside of crowns of anterior tooth crowns.

The 2 mm fine pins are suitable for polishing of fissures.

- 1 black, medium-hard version for non-precious metals and gold
- 2 brown, extra-hard version for non-precious metals and gold
- 3 red, fine, precious metal - pre-polish
- 4 green, x-fine, precious metal - high-shine polish
- 5 blue, coarse, (diamond particles) for ceramic, non-precious metal, precious metal and titanium
- 6 violet, medium, (diamond particles) for ceramic, non-precious metal, precious metal and titanium

MANDRELL

rostfrei

für Occlupol
2 mm / 3 mm



REF	PA2007	PA3007
	5/1	5/1

STAHPINSEL

für den Einsatz
im 3 mm Occlupol-
Mandrell



REF	PU1110
	5/1

Anwendungshinweis

universell im Einsatz,

z. B. zum Reinigen des Kroneninneren
oder zum Mattieren von Kauflächen